

股関節外転スタンダー

LORI ロリ



- 外転調整機構により股関節を安定位置に保ちます
- 前支え (prone) 姿勢、後ろ支え (spine) 姿勢、いずれにも対応できます
- リクライニング機構により臥位ポジションも可能

サイズ 目安

- サイズ 1
(baby)
- サイズ 2
(junior)

COLORS

スカイブルー

ピンク

標準装備


standard equipment



股関節外転角度
0 ~ 35°で設定可能

耐荷重

サイズ 1 : 35kg
サイズ 2 : 50kg

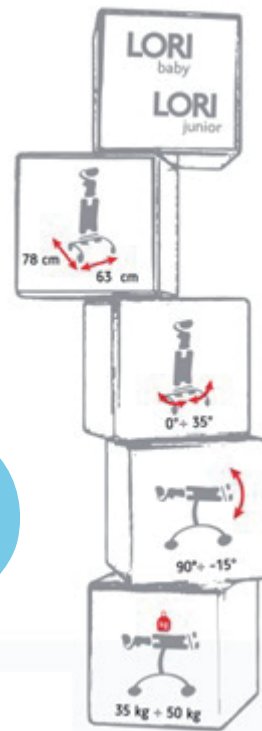

- prone/spine 対応フレーム
- 膝パッド
- 胸部パッド (ラテラルサポートとベルト)
- フットプレート
- 骨盤パッド

株式会社 **松本義肢製作所**
しあわせをかたちにする人と技術の会社です
〒461-0013 名古屋市中区飯田町 51 番地

担当の義肢装具士もしくは下記連絡先にご相談ください。

お問い合わせ先

TEL : (052) 386-1523

海外事業部

FAX : (052) 386-1533

E-mail: kaigai@pomgs.co.jp



● 股関節のために...

脳性麻痺のお子様の3人に1人が股関節形成不全を呈し、座る、立つ、歩く能力に影響を与え、また、痛みを引き起こす可能性があります。早期の発見と介入により、のちの処置や手術の必要性を最小限に抑え、生活の質を向上させることができます。

股関節を外転させることにより、臼蓋から大腿骨頭が抜け出そうとする動きが抑えられます。立位訓練がしたいのに股関節の問題でスタンディングボードを使用できていない方にとって、LORI（ロリ）股関節外転スタンダーは大きなサポートとなります。



オプション

option



セラピートレイ



ラテラルサポートとベルト

※胸部パッドには標準でラテラルサポートとベルトが装備されます。骨盤パッドに必要な場合は追加オプションとなります。



3D 骨盤サポート
ポジショニングシステム




spine 方向用ヘッドレスト



prone 方向用ヘッドレスト

3D 骨盤サポート
ポジショニングシステムが必要となります

製品サイズ product size

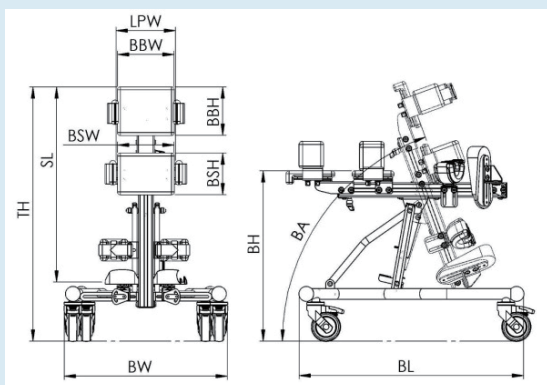

		サイズ 1	サイズ 2
フレーム幅	BW	63cm	63cm
フレーム長	BL	78cm	78cm
全高（ヘッドレスト含まず）	TH	94cm	120cm
リクライニング最大時の高さ	BH	60cm	75cm
フットプレート～肩の高さ	SL	44 ～ 78cm	55 ～ 108cm
リクライニング角度	BA	90°～ -8°	90°～ -15°
ラテラルサポート（オプションの幅）	LPW	12 ～ 20cm	17 ～ 25cm
ヒップサポートの高さ	BSH	15cm	20cm
ヒップサポートの幅	BSW	20cm	25cm
チェストサポートの高さ	BBH	18cm	22cm
チェストサポートの幅	BBW	20cm	25cm